

Používateľský manual

Masážne nohavice s kompresiou vzduchu FyzioGun CompressFit



Úvod

Masážne nohavice so vzduchovou kompresiou sú inteligentné masážne zariadenie špeciálne navrhnuté na uvoľnenie a regeneráciu svalov nôh. Využívajú technológiu vzduchového tlaku na simuláciu techník ručnej masáže, čím poskytujú komplexný a pohodlný masážny zážitok. Vďaka viacerým komorám pokrývajú celé nohy vrátane stehien, lýtok a členkov. Komory sa počas masáže postupne nafukujú a vyfukujú, čím vytvárajú mierny tlak na podporu krvného obehu, zmiernenie únavy nôh a uvoľnenie svalového napätia.

Dostupné ve velikosti M a L

Ujistěte se, že velikost produktu odpovídá délce vaší nohy.

M 373mm

972mm

L 416mm

1142mm

Horní část stehna

Měřená délka

Jak změřit vnitřní délku nohy:
Změřte vzdálenost od paty po horní část stehna.

M: pro většinu osob s výškou 165–180 cm
L: pro vyšší osoby s výškou 180–195 cm

Příslušenství v balení

Masážní nohavice ×2

Nabíjecí kabel ×2



Použitie a nastavenie

1. Zapnutie: Stlačte tlačidlo napájania.
2. Nastavenie tlaku: Nastavte požadovaný tlak tlačidlami + a - na ovládacom paneli. Odporúčame začať s tlakom okolo 80 mmHg a postupne ho prispôbovať podľa pohodlia.
3. Nastavenie času: Vyberte čas masáže stlačením tlačidla (15, 30 alebo 45 minút).
4. Nastavenie režimu: Prepínajte medzi 5 režimami masáže (vlnová masáž, dvojvlnová, sekvenčné stláčanie + dvojvlnová, sekvenčné stláčanie, celoplošné stláčanie).

Bezpečnostné pokyny

- Nepoužívajte zariadenie s neoriginálnymi adaptérmi.
- Nerozoberajte ani neopravujte zariadenie svojpomocne.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo servisným strediskom.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo ak sa dostalo do kontaktu s vodou.
- Po použití uchovávajte v suchom prostredí, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Osoby s kardiostimulátormi, kovovými implantátmi, vážnymi ochoreniami srdca, vysokým alebo nízkym krvným tlakom, tehotné ženy a deti by zariadenie nemali používať.
- Ak pocítite nepohodlie alebo abnormality počas používania, okamžite prestaňte.

Údržba a čistenie

- Neprať, čistiť len vlhkou handričkou alebo dezinfekčným roztokom na báze alkoholu.
- Pri uskladení pravidelne (každé 2 mesiace) dobiť batériu, aj keď zariadenie nie je používané.

Technické parametre

- Vstupné napätie: DC 5V 1A
- Tlak: 30/50/80/120/160/200/240 mmHg
- Teplotný rozsah: 5 °C – 40 °C
- Vlhkosť: 5 % – 93 % RH
- Barometrický rozsah: 86 kPa – 105 kPa
- Batéria: indikátor stavu batérie (zelený: 100–65 %, modrý: 65–25 %, červený: 25–5 %)
- Automatické vypnutie pri nabíjaní alebo vybití pod 5 %

Príslušenstvo

- Ovládací panel alebo diaľkový ovládač
- Adaptér na nabíjanie
- Hadice na pripojenie komôr


Diagnostika chýb

- Produkt sa nezapína: batéria je vybitá – nabite a skúste znovu.
- Chyba displeja Er 1: nízka hodnota tlaku.
- Automatické vypnutie: uplynul nastavený čas alebo došlo k poklesu napätia.

Upozornenia

- Pri prvom použití nastavte nízky tlak a prispôbujte podľa pocitu pohodlia.
- Nepoužívajte počas nabíjania.
- Dbajte na správne odpojenie hadíc po použití, aby sa nepoškodili.

5 masážnych režimů pro maximální pohodlí

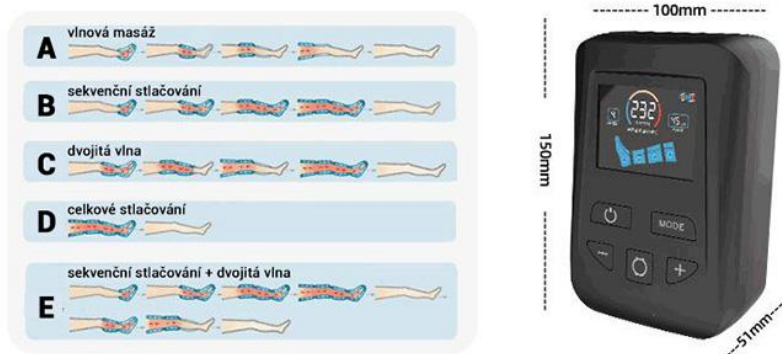

Možné použití na jednu nebo obě nohy zároveň

